

The image consists of several horizontal bands of varying heights. The top and bottom bands are solid blue. The middle bands are white and contain dark silhouettes of dental equipment. From left to right, the silhouettes include a vertical tube, a vertical tube with a small protrusion at the top, a vertical tube with a handle, and a vertical tube with a complex handle and nozzle. The text 'CABINET DENTAIRE MOBILE' is printed in white on the right side of the middle white band.

CABINET DENTAIRE MOBILE

Dentalone



Prodiguer des soins, partout.

Le module de soins dentaires mobile Dentalone se déploie à partir d'une position "transport" pour obtenir un poste de traitements dentaires ergonomique et mobile. Dentalone propose toute une série d'instruments et de fonctionnalités étendues permettant de réaliser de nombreux traitements dentaires en dehors d'un cabinet :



- Ecran de contrôle Multi Pad LCD
- Micromoteur sans charbon NLX nano (40 000 min⁻¹), avec lumière LED, irrigation interne et corps en titane
- Détartreur multifonction intégré Varios 170 avec lumière LED, pièce à main VA2-LUX-HP fine et légère
- Seringue eau/air avec lumière LED
- Canule d'aspiration
- Réservoir de 500 mL
- Conteneur à déchets 1 Litre



Contenu

- 1 valise de transport
- 1 réservoir d'eau pour le spray
- 1 réservoir réceptacle pour l'aspiration
- 1 compresseur intégré
- 1 pompe d'aspiration intégrée
- 1 pédale de contrôle à vitesse variable
- 1 tablette extensible

Ensemble complet Dentalone

MODÈLE	RÉF	TTC
Dentalone	S9070	15 311€

Spécifications

- Dimensions : Valise de transport (poignée baissée) : L 351 x P 405 x H 545 mm
Valise de transport (poignée tirée) : L 351 x P 405 x H 1 075 mm
Sans coffre : L 350 x P 405 x H 496 mm
- Hauteur de travail : 766 mm
- Poids avec coffre : 18,5 kg
- Alimentation secteur : CA 100-230 V 50/60 Hz

VIVA ace



Tout Devient Possible

Pour prodiguer des soins dentaires de qualité, plus confortablement, où que vous soyez.

VIVA ace regroupe les commodités d'un cabinet dentaire dans un boîtier compact intégrant : micro-moteur multi-usages, détartreur à ultrasons, et bien plus encore. Facile à transporter, sa structure légère s'installe en toute facilité dans diverses situations. Avec ce dispositif totalement inédit et très fonctionnel, prodiguez des traitements dentaires en toute sécurité où que se trouve le patient.



Valise légère et compacte



Traitez efficacement, comme dans un cabinet dentaire



Montage et démontage faciles




Valise légère et compacte

Maniable et très légère : Elle pèse seulement 8,6 kg. Grâce à son volume compact, elle trouve tout de suite sa place dans une voiture et se transporte facilement. Emmenez-la partout, d'un site à l'autre. Pour obtenir ce dispositif mobile nous avons créé des éléments légers et compacts sans jamais oublier l'aspect fonctionnel.

Un véritable « tout-en-un »

Un micro-moteur, un détartreur à ultrasons, une seringue 3-en-1 et un dispositif d'aspiration ; le tout dans un boîtier compact doté d'espaces de rangement pour tous les instruments.

Emmenez-la partout :
Elle pèse seulement 8,6 kg.*

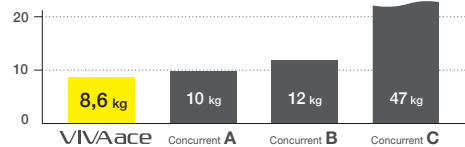

*Poids hors pièces à main





Cabinet dentaire mobile extrêmement fonctionnel, identique à un cabinet standard

Grâce au panneau de commande LCD, intuitif, très lisible, et au fonctionnement optimal de chaque instrument, bénéficiez d'une efficacité et d'une sécurité maximales.

Ultra fonctionnel dans un boîtier compact



Les clichés montrent des éléments en option.

Micro-moteur fiable, performant et compact

Fonction Endodontie complète




NLX plus

Parfaitement adapté à toutes les exigences de la dentisterie de pointe

	Vitesse de rotation (min ⁻¹)	Couple (Ncm)
Mode thérapeutique Général	1 000-40 000	4,0
Mode Endodontie	100-5 000	0,3-3,0

Seringue 3-en-1

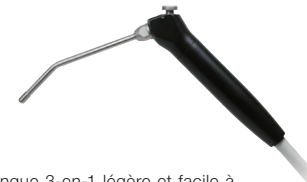

Seringue 3-en-1 légère et facile à utiliser. L'embout de la seringue se détache grâce à un mécanisme extrêmement simple.

Sonde lumineuse (en option)



isoE-LUX

Déstartreur à ultrasons multi-usages

Gamme exhaustive d'inserts



Varios2 Lux

Moteur à ultrasons NSK iPiezo


La technologie iPiezo délivre la puissance adéquate au niveau de l'insert en fonction de la surface. Elle assure une fréquence de vibrations stable en sortie sans aucune perte de puissance.

Aspiration



Système de valve pour ajuster la puissance d'aspiration.

Pour bien éclairer la cavité buccale, quel que soit l'environnement thérapeutique. Bonne accessibilité grâce au corps fin qui permet également d'accéder à des zones difficiles à voir.

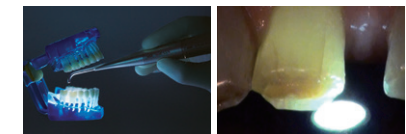




Installation et rangement rapides


Installation et rangement simples, faciles et rapides = travail plus efficace et plus simple. Les porte-instruments et le bras peuvent être réglés à 4 hauteurs différentes.

OUVREZ

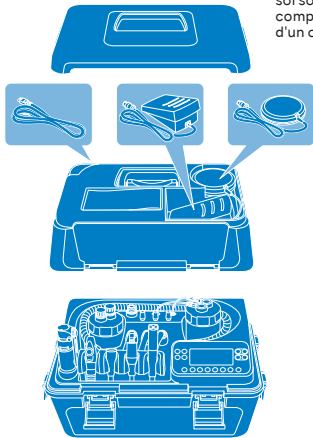


L'hygiène est également préservée puisque les éléments qui touchent le sol sont stockés dans un compartiment séparé, doté d'un couvercle.

INSTALLEZ

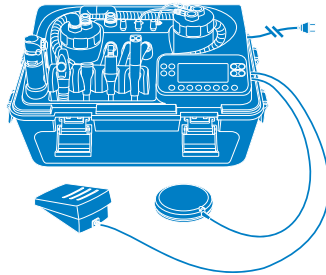

RÉGLEZ

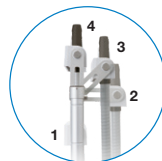

Hauteur et angle réglables sur 4 niveaux

Possibilité de régler selon diverses positions, debout ou assis.

MAX
51,6 cm



Rangement rapide

Nécessite de retirer uniquement les pièces à main.



Entretien simple

VIVA ace



MODÈLE	RÉF	TTC
VIVA ace 230 Complete Set	Y1003773	12 573€

Contenu

- Commande
- Cordon d'alimentation CA
- Pédale (FC-76S)
- Pédale (FC-70S)
- Boîtier supérieur
- Jeu de tuyaux V-ace Vide
- Flacon V-ace Vide
- Embouts V-ace Vide (10)
- Jeu de flacons d'eau V-ace
- Jeu de seringues à 3 voies V-ace
- Bandoulière
- Moteur VIVAace
- Démarreur VIVAace

Caractéristiques techniques (commande)

- Dimensions : L 462 x P 298 x H 284 mm
- Poids de l'appareil : 8,6 kg
- Alimentation électrique : CA 100-240 V 50/60 Hz
- Source d'alimentation (entrée) : 130 VA

VIVAMATE G5



Micromoteur Portable LED de retouche pour prothèse-applications générales

Micromoteur LED spray interne



La taille compacte du micromoteur a été spécifiquement développée pour la pratique dentaire mobile et pèse seulement 148 g (cordon non inclus) et dispose de la lumière LED. Bien que complètement portable, il fonctionne comme un système de chirurgie répondant à un large éventail de traitements cliniques et est compatible avec vos contre-angles et pièces à main^{*1} existantes, ce qui vous facilite la maîtrise du coût d'une dentisterie mobile.

^{*1} Conforme à la norme ISO3964



^{*2} cordons moteurs inclus

Capable d'utiliser à la fois la batterie rechargeable et l'adaptateur secteur pour l'unité de commande compacte

Pédale de contrôle (en option)

Permet d'ajuster facilement la vitesse du moteur en soulevant la pression exercée sur la pédale de contrôle, et ce, sans quitter des yeux la zone de traitement.



Mallette de transport

Fourni avec une mallette de transport conçue pour accueillir l'unité VIVAMATE G5 et ses différents accessoires.



Ensemble complet VIVAMATE G5

MODÈLE	RÉF	TTC
VIVAMATE G5 230V SET	Y1002801	1 943€

Contenu

- Unité de contrôle
- Support instrument
- Adaptateur CA
- Micromoteur et cordon
- Cordon d'alimentation CA
- Mallette de transport

Spécifications

[Unité de contrôle]

- Dimensions : L 72 x P 180 x H 36 mm
 - Poids : 370 g
 - Temps de charge de la batterie : env. 2 heures.*
 - Autonomie de la batterie en fonctionnement continu : env. 1 heure*
- *Varie en fonction des situations d'utilisation.

[Micromoteur]

- Dimensions : ø22 x L 68,6 mm
- Poids : 148 g (cordon moteur inclus)
 - Vitesse : 3 000-30 000 min⁻¹
 - Couple : 3 Ncm (jusqu'à 30 000 min⁻¹ en rotation)